



medifa 6000

移动
手术台

we care.

产品优势概览

- 电动液压功能
- 电动液压腿板调节功能（可选）
- 台面纵向移动（可选）
- 可集成无源手动备用系统
- 不同软垫可选：Viscoelastic SF 或 PUR
- 所有金属部件均采用优质不锈钢 (1.4301)
- 最适合清洁消毒的设计和材质
- 操作简便
- 机械调节部件操作平稳，符合人体功能学
- 多种体位设置，适合不同手术
- 适用于 X 射线或 C 型臂成像设备
- 适用于所有不同外科手术的附件
- 最大负载：454 kg





人体工程学

- 通过万向轮和第五滚轮，手术台轻松移动
- 特殊的底座设计，外科医生脚部可自由放置



操作快速简单

- 机械调节，操作平稳



手动备用系统

- 在电子故障或电源故障的情况下确保手术台的功能
- 立柱上预设常用体位选项
- 通过液压脚踏泵调节
- 选配



手术台固定液压缸

- 底座上可伸缩的液压缸 保证了手术台操作时的最佳稳定性
- 选配

灵活性和舒适性



一套固定装置，适用不同软垫

- 通过销钉系统固定和拆卸软垫
- 更卫生并易于清洁（无尼龙搭扣）
- 可以在 Viscoelastic SF 和 PUR 不同材质软垫之间轻松更换



舒适和清洁

- 柔软和卫生的软垫可以预防医院感染，提高病人安全



Viscoelastic SF 材质软垫

- 非常柔软的减压粘弹性泡沫
- 预防褥疮
- 厚度：80 mm
- 可拆卸
- 可导电
- X 射线可透



PUR 材质软垫

- 符合人体工程学的成形
- 厚度：60 mm
- 可拆卸
- 可导电
- X 射线可透



带电池电量指示的彩色显示屏

反向模式

中央制动

不同体位键

激活手持控制器

急停按钮 (601920无此按钮)

自动回零位

1. 标配：手持控制器，集成彩色显示和电池指示器 (可选：无线红外线遥控，商品号604070，不可后加装)。
2. 标配：立柱控制面板。
3. 选配：脚踏开关，用于高度、侧倾和特伦德伦伯卧位调节 (商品号604060)。
4. 选配：手动紧急备用系统，通过脚踏板调节 (商品号50655，不可后加装)。



medifa 6000系列



电动液压手术台
型号 601700

- 高度调节范围：690 ~ 1050 mm
- 特伦德伦伯卧位：-30° ~ +30°
- 台面可侧倾20°
- 下背板调节范围 -25° ~ +75°
- 上背板调节范围 -35° ~ +50°
- 屈曲 / 沙滩椅位
- 一键回零位
- 患者体位方向可改变 (反向模式)
- 集成用于安装附件的标准不锈钢侧轨 (25 x 10 mm)
- 从头部到脚部区域，X 射线可连续穿透
- 通过4个 ø 125 mm 万象脚轮移动，可导电，带中央制动装置和第五脚轮
- 可选择 Viscoelastic SF (厚度 = 80 mm) 或 PUR 材质软垫 (厚度 = 60 mm)，X 射线可穿透，可导电，可拆卸
- 最大负载：454 kg



更多其他型号:
型号 601820
台面可纵向移动，最大距离为300 mm

型号 601120
整体式背板
台面可纵向移动，最大距离为300 mm



- 601120型号可以选配手动调节肾桥
- 6000系列所有型号手术台都可以配备不同的附件，适用于不同手术

配置示例

商品号601700
电动液压手术台

商品号61144SF
头板

商品号61250SF
上背板

商品号61615SF
分腿板

商品号61217
手臂板

价格请咨询!

适用领域

- 普通外科
- 骨科
- 妇科
- 泌尿科
- 耳鼻喉科

medifa 6000系列



电动液压手术台
型号 601920

- 高度调节范围：690 ~ 1050 mm
- 特伦德伦伯卧位：-30° ~ +30°
- 电动液压腿板调节：-90° ~ +75° (单独或同步)
- 台面纵向移动最大距离 300 mm
- 台面可侧倾 20°
- 下背板调节范围：-25° ~ +75°
- 屈曲 / 沙滩椅位
- 一键回零位
- 患者体位方向可改变 (反向模式)
- 集成用于安装附件的标准不锈钢侧轨 (25 x 10 mm)
- 从头部到脚部的连续X射线接收装置移动卡槽，用于放置X射线接受装置
- 通过四个直径为125 mm 的万象轮驱动，带中央锁定装置，可导电
- 可选择粘弹性 SF 软垫 (厚度 = 80mm) 或 PUR 软垫 (厚度 = 60mm) ，X 射线可穿透，可导电，可拆卸
- 最大承重: 454 kg



电动液压腿板调节

601920型号丰富了6000系列手术台，其腿板可由电动液压控制调节，在 -90° ~ +75° 范围之间调节。

每个腿板都可以单独调节，也可以同步调节。



更符合人体工程学的操作和优势，特别是在以下操作中：

- 在反向模式下进行肩部手术，肩板使用电动液压调节（更多自由操作空间，更方便使用 C 型臂）
- 矫形外科手术
- 妇科和泌尿科手术 (腿板采用电动液压调节)
- 膝关节镜手术

配置示例

商品号601920
电动液压手术床

商品号61144SF
头板

商品号61255SF
上背板

商品号61616SF
分腿板

商品号61217
手臂板

价格请咨询！

适用领域

- 普通外科
- 骨科
- 肩部手术
- 膝关节镜手术
- 妇科
- 泌尿外科
- 耳鼻喉科

		调节范围	601120	601700	601820	601920
	高度调节	690 - 1,050 mm	●	●	●	●
	特伦德伦伯卧位	-30° / +30°	●	●	●	●
	台面侧倾	-20° / +20°	●	●	●	●
	背板调节 (下背板)	-25° / +75°	●	●	●	●
	背板调节 (上背板)	-35° / +50°		●	●	
	腿板调节 (单独和同步)		■	■	■	●
	屈曲位		●	●	●	●
	纵向移动	300 mm	●		●	●
	第五滚轮		●	■	■	■
	自动恢复零位		●	●	●	●
	中央制动装置		●	●	●	●
	肾桥		◆■	●	●	
	手动备用系统		◆	◆	◆	◆
	底座稳定液压缸		◆	◆	◆	◆
	最大负载		454 kg	454 kg	454 kg	454 kg

● 电动液压 ■ 手动 ◆ 选配



普外科手术
仰卧位



胸外科手术
侧卧位



减肥手术
站立体位



妇科、泌尿科和直肠外科
截石体位



直肠科和脊柱外科手术
膝盖-肘部位



脊柱外科手术
俯卧位



神经外科手术
沙滩椅体位



膝关节镜手术
仰卧位



耳鼻喉手术
仰卧位





神经外科手术
仰卧位




矫形外科手术
仰卧位，带延伸装置






矫形外科手术
仰卧位，带延伸装置

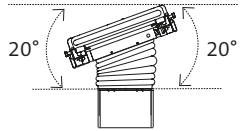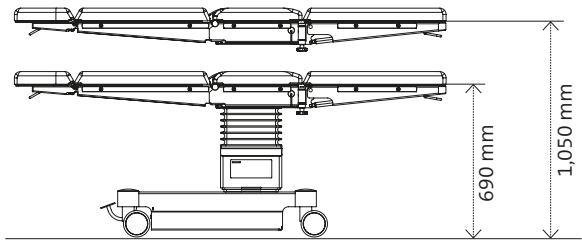


型号 601700 / 601820

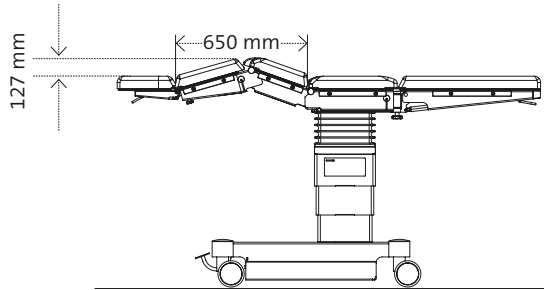




型号 601700 / 601820

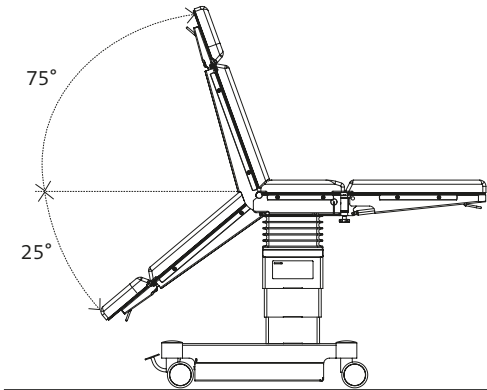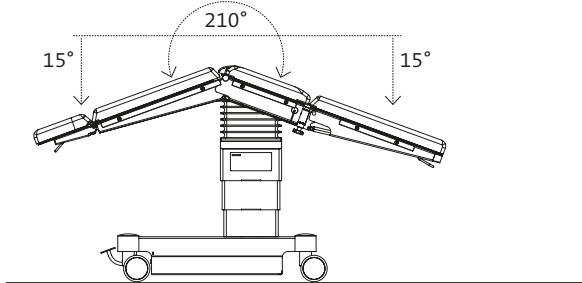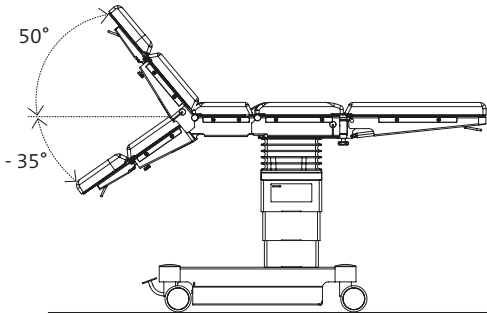


型号 601920

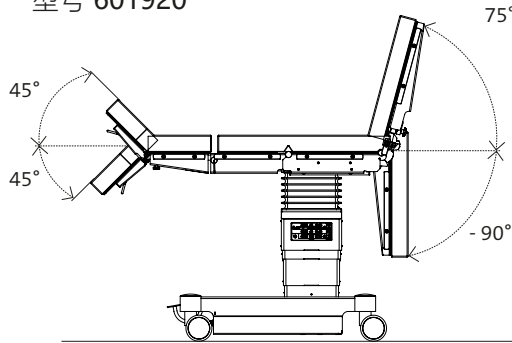


型号 601120 / 601700 / 601820

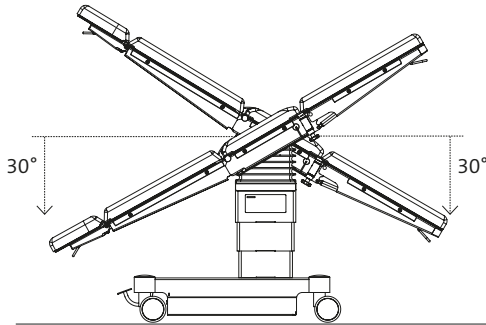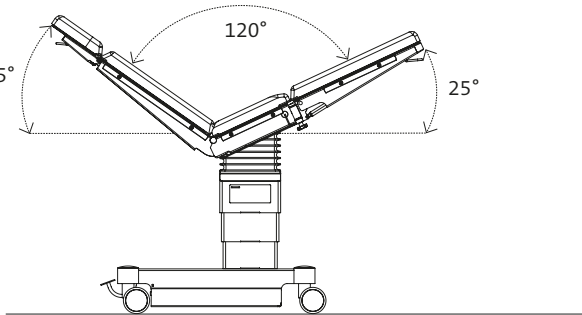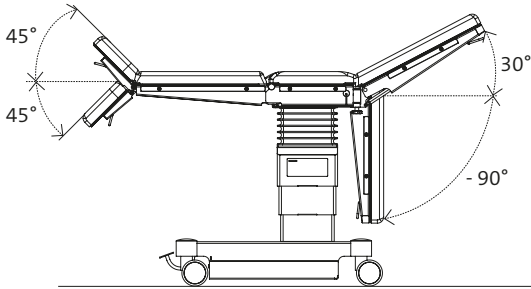


601120平面图

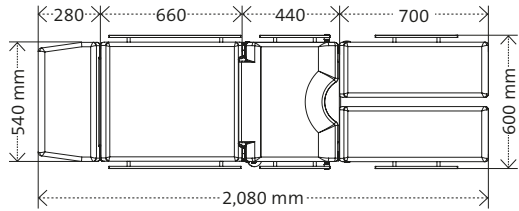


601700 / 601820平面图

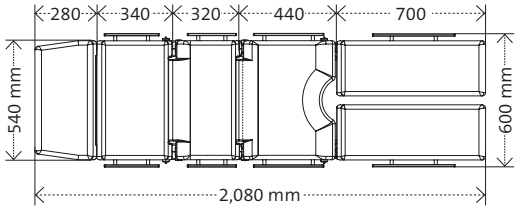

601920平面图

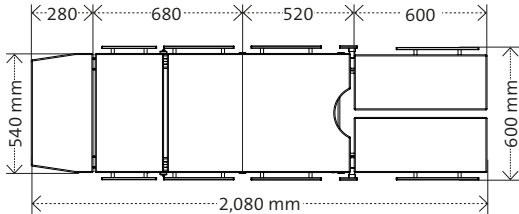


601920型号装配61631附件平面图

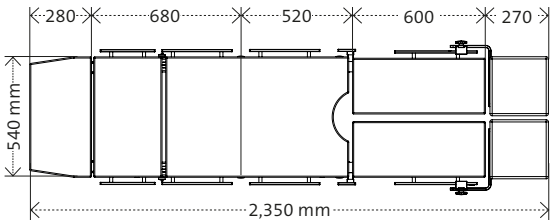


长度(带SF软垫测量)


台面纵向移动
(型号 601120 / 601820)

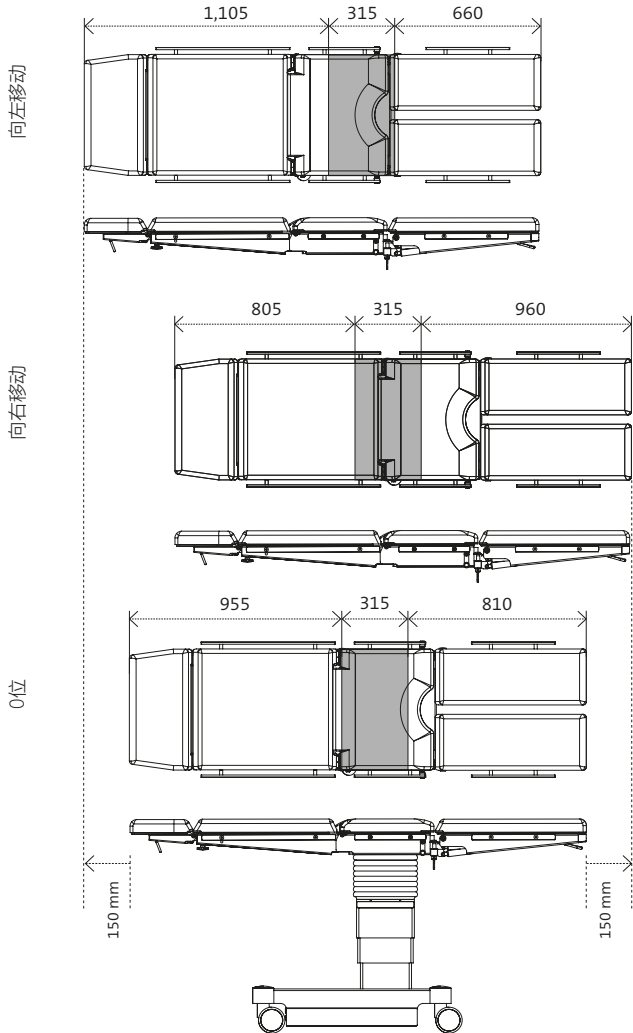

台面纵向移动
(型号 601920)

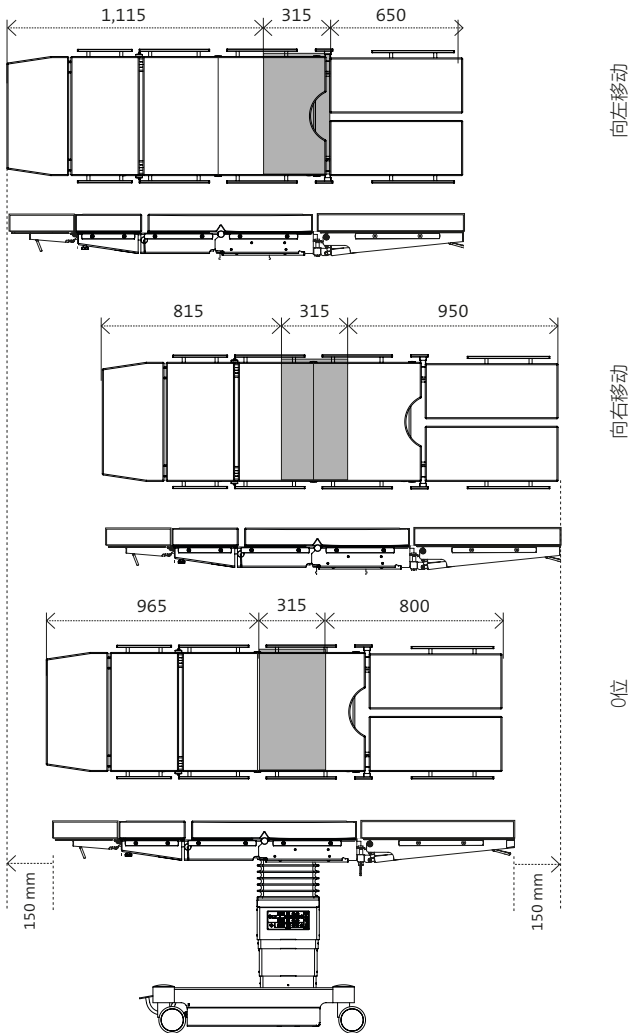


技术数据符合行业 ± 3% 公差范围

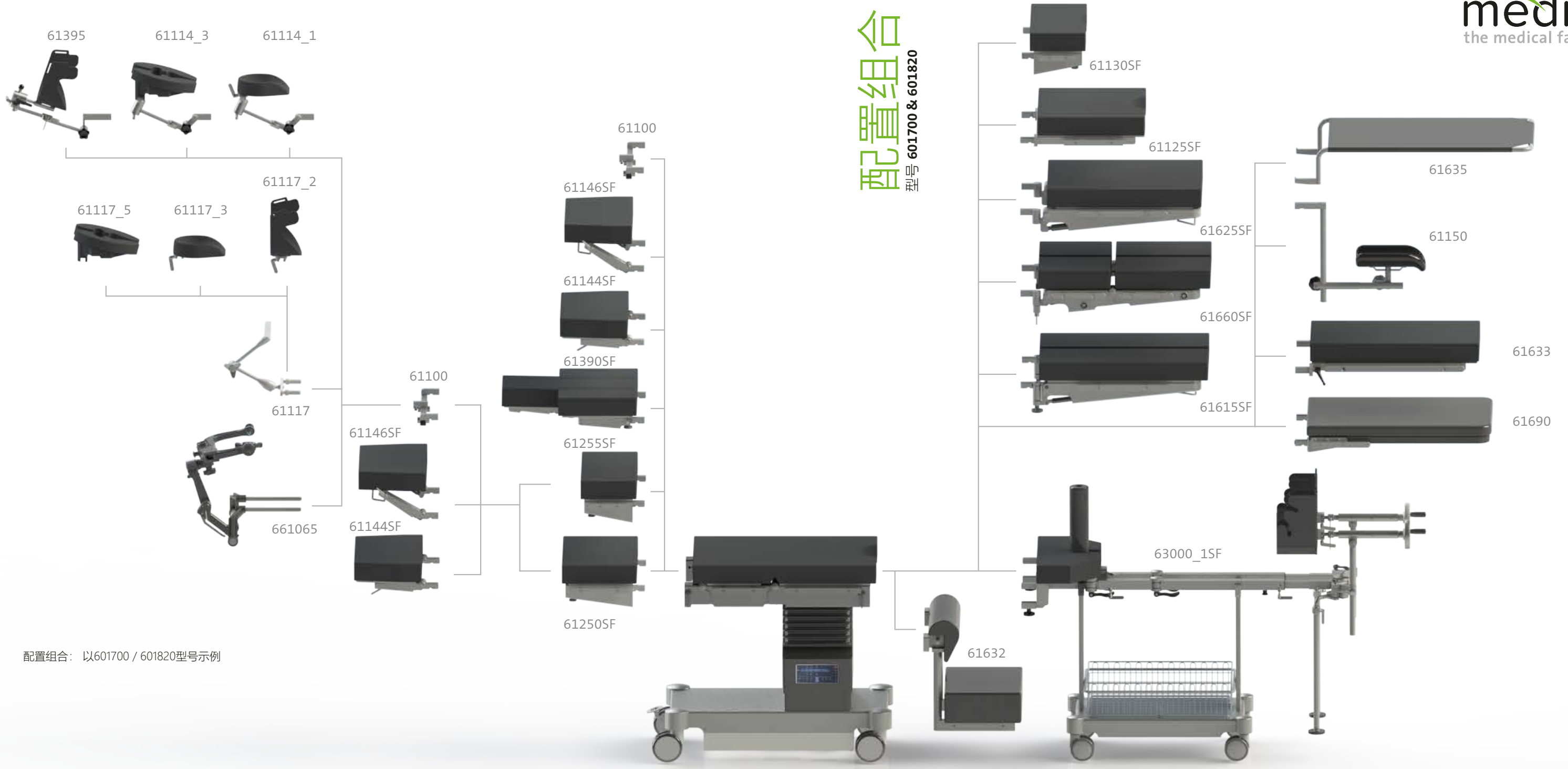

配置組合
型号 601700 & 601820

配置组合：以601700 / 601820型号示例

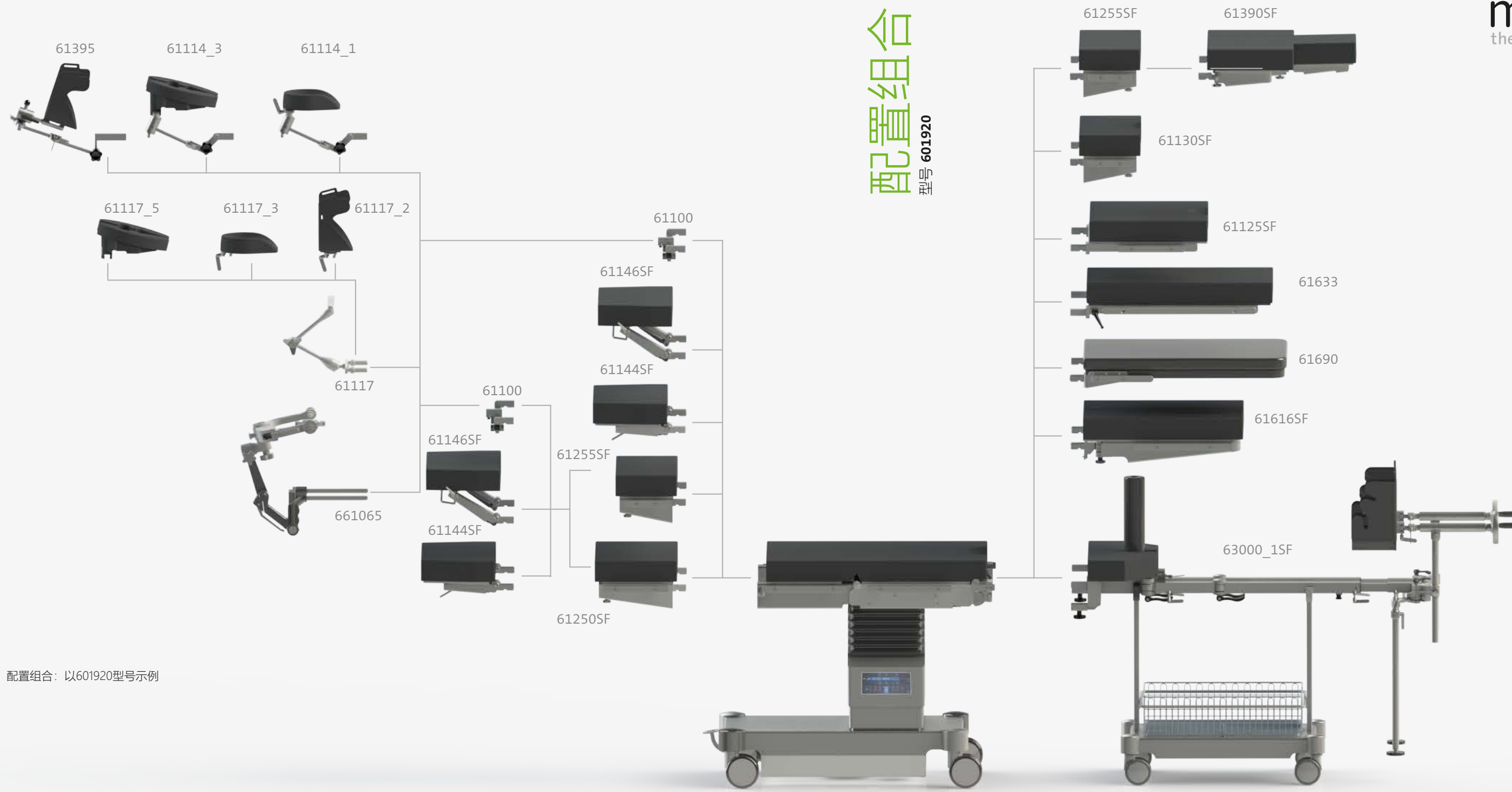

配置组合：以601920型号示例



**头枕, 适用于 medifa 5000和6000系列
商品号 61144SF**

- 通过空气弹簧轻松调节: $-45^{\circ} \sim +45^{\circ}$
- 与背板对接或分离
- 长 x 宽: 285 x 495 mm
- 软垫: Viscoelastic SF 材质, 厚度 = 80 mm, X 射线可穿透, 可导电, 可拆卸
- 可选: PUR 材质软垫, 厚度 = 60 mm (商品号61144)



**双重调节头枕, 适用于 medifa 5000和6000系列
商品号 61146SF**

- 通过空气弹簧轻松调节: $-45^{\circ} \sim +45^{\circ}$, 双重调节可以实现额外的倾斜
- 与背板对接或分离
- 长 x 宽: 285 x 495 mm
- 软垫: Viscoelastic SF 材质, 厚度 = 80 mm, X 射线可穿透, 可导电, 可拆卸
- 可选: PUR 材质软垫, 厚度 = 60 mm (商品号61146)



**上背板, 适用于601700, 601820和601920型号 (长 = 360 mm)
商品号 61250SF**

- 与下背板对接或分离
- 集成标准侧轨 (欧标)
- 长 x 宽: 360 x 540 mm
- 软垫: Viscoelastic SF 材质, 厚度 = 80 mm, X 射线可穿透, 可导电, 可拆卸
- 可选: PUR 材质软垫, 厚度 = 60 mm (商品号61250)



**上背板, 适用于601700, 601820和601920型号 (长 = 250 mm)
商品号 61255SF**

- 与下背板对接或分离
- 集成标准侧轨 (欧标)
- 长 x 宽: 250 x 540 mm
- 软垫: Viscoelastic SF 材质, 厚度 = 80 mm, X 射线可穿透, 可导电, 可拆卸



**肾桥, 适用于 medifa 5000系列和601120型号
商品号 61655SF**

- 通过手动曲柄进行手动调节
- 软垫: Viscoelastic SF 材质, 厚度 = 80 mm, X 射线可穿透, 可导电, 可拆卸
- 可选: PUR 材质软垫, 厚度 = 60 mm (商品号61655)
- 不可后加装!




**三块式背板, 适用于 medifa 5000系列和601120型号
商品号 61385SF**

- 包含头枕
- 通过三个可拆卸的部分, 可轻松进入肩部区域
- 与骨盆板对接和分离 (反向模式)
- 通过空气弹簧轻松调节
- 长 x 宽: 每块板315 x 170 mm
- 软垫: Viscoelastic SF 材质, 厚度 = 80 mm, X 射线可穿透, 可导电, 可拆卸
- 可选: PUR 材质软垫, 厚度 = 60 mm (商品号61385)



**三块式背板, 适用于601700, 601820和601920型号
商品号 61390SF**

- 包含头枕
- 通过三块可拆卸的部分, 可轻松进入肩部区域
- 与下背板对接和分离
- 长 x 宽: 每块板315 x 170 mm
- 软垫: Viscoelastic SF 材质, 厚度 = 80 mm, X 射线可穿透, 可导电, 可拆卸
- 可选: PUR 材质软垫, 厚度 = 60 mm (商品号61390)

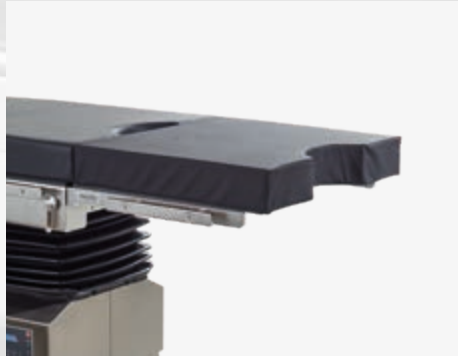

**长型附加骨盆板, 适用于 medifa 5000和6000系列 (长 = 430 mm)
商品号 61125SF**

- 将骨盆板部位延长430 mm
- 带镂空
- 集成标准侧轨 (欧标)
- 长 x 宽: 430 x 540 mm
- 软垫: Viscoelastic SF 材质, 厚度 = 80 mm, X 射线可穿透, 可导电, 可拆卸
- 可选: PUR 材质软垫, 厚度 = 60 mm (商品号61125)




**附加骨盆板, 适用于 medifa 5000和6000系列 (长 = 250 mm)
商品号 61130SF**

- 将骨盆板部位延长250 mm
- 带镂空
- 集成标准侧轨 (欧标)
- 长 x 宽: 250 x 540 mm
- 软垫: Viscoelastic SF 材质, 厚度 = 80 mm, X 射线可穿透, 可导电, 可拆卸



**腿板, 适用于 medifa 5000系列和601120, 601700, 601820型号
商品号 61625SF**

- 通过空气弹簧调节: $-90^{\circ} \sim +30^{\circ}$
- 与骨盆板对接和分离
- 集成标准侧轨 (欧标)
- 长 x 宽: 670 x 540 mm
- 软垫: Viscoelastic SF 材质, 厚度 = 80 mm, X 射线可穿透, 可导电, 可拆卸
- 可选: PUR 材质软垫, 厚度 = 60 mm (商品号61625)

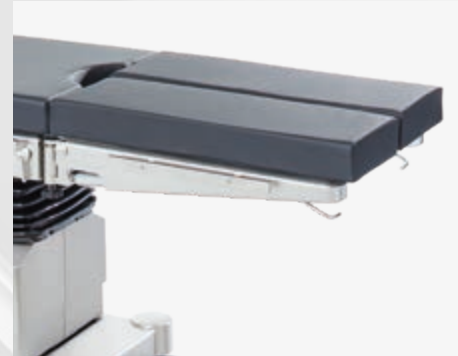


**分腿板, 适用于 medifa 5000系列和601120, 601700, 601820型号
商品号 61615SF**

- 通过空气弹簧调节: $-90^{\circ} \sim +30^{\circ}$ (上下), 平面可旋转 180°
- 与骨盆板对接和分离
- 集成标准侧轨 (欧标)
- 长 x 宽: 每块板730 x 250 mm
- 软垫: Viscoelastic SF 材质, 厚度 = 80 mm, X 射线可穿透, 可导电, 可拆卸
- 可选: PUR 材质软垫, 厚度 = 60 mm (商品号61615)



**分腿板, 适用于601920型号
商品号 61616SF**

- 通过电动液压调节: $-90^{\circ} \sim +75^{\circ}$ (上下), 平面可旋转 180°
- 与骨盆板对接和分离
- 集成标准侧轨 (欧标)
- 长 x 宽: 每块板610 x 250 mm
- 软垫: Viscoelastic SF 材质, 厚度 = 80 mm, X 射线可穿透, 可导电, 可拆卸

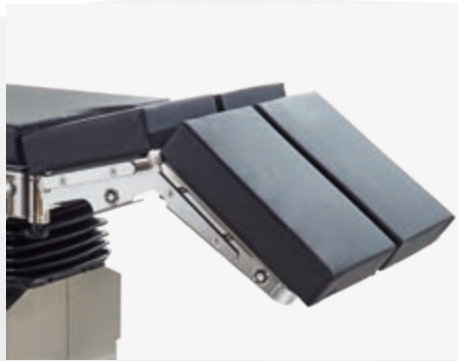

**双重调节分腿板, 适用于 medifa 5000和601120, 601700, 601820型号
商品号 61660SF**

- 通过空气弹簧调节: $-90^{\circ} \sim +30^{\circ}$ (上下), 平面可旋转 180° , 可弯曲
- 与骨盆板对接或分离
- 集成标准侧轨 (欧标)
- 长 x 宽: 每块板 720×250 mm
- 软垫: Viscoelastic SF 材质, 高 = 80 mm, X 射线可穿透, 可导电, 可拆卸
- 可选: PUR 材质软垫, 厚度 = 60 mm (商品号61660)




**碳材质板, 适用于 medifa 5000和6000系列
商品号 61690**

- 含软垫
- 用于术中 X 射线成像, 实现最佳透视效果 (可 360° 透视)
- 与骨盆板或下背板对接或分离
- 长 x 宽: 750×540 mm
- 软垫: Viscoelastic SF 材质, 厚度 = 80 mm, X 射线可穿透, 可导电, 可拆卸




**转移腿托, 适用于 medifa 5000和6000系列
商品号 61635**

- 用于腿部的短时定位
- 与骨盆板对接或分离
- 长 x 宽: 900×500 mm

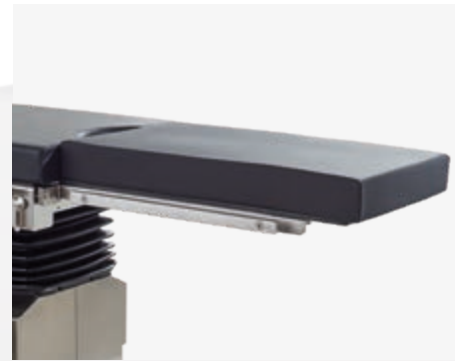

**小儿外科手术板, 适用于 medifa 5000和6000系列
商品号 61633**

- 与骨盆板连接或分离
- 集成标准侧轨 (欧标)
- 长 x 宽: 700×430 mm
- 软垫: Viscoelastic 材质, 厚度 = 60 mm, 可导电

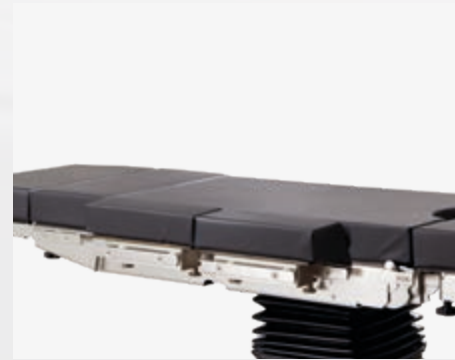

**加宽板, 适用于 medifa 5000, 6000和7000系列
商品号 61355SF**

- 用于扩展手术台的台面
- 集成标准侧轨 (欧标)
- 长 x 宽: 每块板 310×105 mm
- 软垫: Viscoelastic SF 材质, 高 = 70 mm, X 射线可穿透, 可导电, 可拆卸
- 可选: PUR 材质软垫, 厚度 = 60 mm (商品号61355)
- 一对



**脚踏开关, 适用于 medifa 5000和6000系列
商品号 604060**

- 附加控制单元, 可调节高度、侧倾和特伦德伦伯卧位功能
- 电线连接
- 不可后加装!



**红外线遥控, 适用于 medifa 5000和6000系列
商品号 604070**

- 无线数据传输
- 可控制手术台所有电气功能
- 含充电装置
- 不可后加装!



**手动紧急备用系统, 适用于 medifa 6000系列
商品号 50655**

- 在电子故障或电源故障的情况下确保手术台的功能
- 通过脚踏板调节
- 不可后加装!




**固定液压缸, 适用于 medifa 6000系列
商品号 50650**

- 四个液压缸延伸至地板, 用于固定, 脚轮离地
- 实现手术台最佳稳定性
- 不可后加装!



**连接杆, 适用于 medifa 5000和6000系列
商品号 61670**

- 将背板的不锈钢连接杆换成由特殊塑料制成的X射线可穿透连接杆
- 改善背板的X射线穿透度

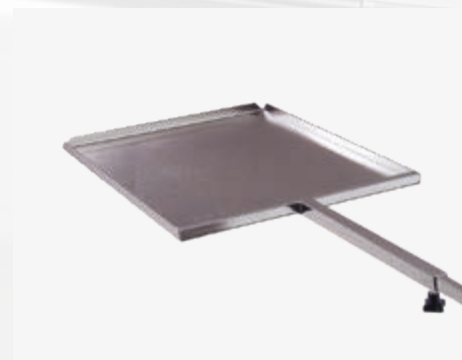

**X 放射线盒支架, 适用于 medifa 5000和6000系列
商品号 61640**

- 用于在手术台的台面下插入X 放射线盒
- 带伸缩杆
- 长 x 宽 x 高: 470 x 385 x 16 mm
- 适用放射盒尺寸: 14" x 17" (美国)
- 材质: 不锈钢



**冲洗装置, 适用于 medifa 5000和6000系列
商品号 61120**

- 包括桶、盆、滤网、管、底盘和固定装置
- 可与骨盆板对接和分离
- 长 x 宽 x 高 (盆): 325 x 265 x 65 mm
- 容积 (桶): 15 升
- 材质: 不锈钢

其他附件

广泛的可选配件完善了我们手术台的应用范围。

为了集中存放附件，我们提供了一个手推车 (商品号341045)，由抛光不锈钢制成。

更多的附件可以在我们《手术台附件》手册中找到。



medifa



medifa healthcare group 融汇贯通了外科领域的专业知识。

medifa 是一家由所有者管理并且业务遍及全球的医疗技术完整解决方案提供商。

medifa 作为德国医疗技术领域最大的 OEM 供应商之一，其产品和服务涵盖了用于一站式交钥匙工程手术室的全套模块化墙体、门、天花板和壁柜系统 RooSy®空间系统）、移动手术台及其附件、手术灯、以及特殊的施工解决方案和器械。


该集团旗下拥有 medifa GmbH & Co. KG (Finnentrop), medifa hygienic rooms GmbH (Ötigheim), medifa metall und medizintechnik GmbH (Rastatt)。medifa healthcare group 在德国拥有三大基地，雇用员工约350名。设计、工程和生产完全在德国进行，公司集团内生产创造的附加值超过80%，确保对客户需求快速响应。

在“we care“的座右铭下，medifa 始终坚持以客户的需求为导向。所有产品均在德国制造，并经过德国，欧盟以及国际质量标准认证。期待用我们一流的咨询、生产、质量和服务，成为您信赖的业务伙伴。

产品

- 模块化手术室系统 (RooSy)
- 移动手术台及手术台配件
- 手术灯 (H!Light)
- 检查诊疗椅
- 功能性器械
- 特殊施工解决方案

medifa 全球

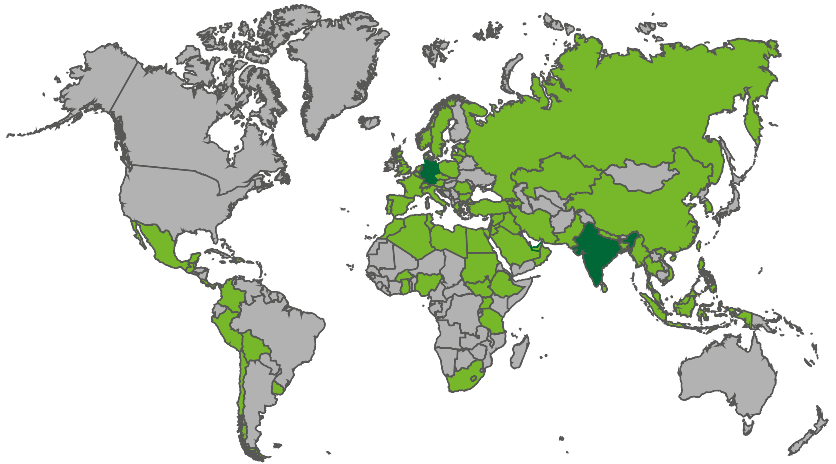

we care.



版本 01-21-CN
保留更改权利。

www.medifa.com

we care. Code



medifa GmbH & Co. KG

Industriestraße 5
57413 Finnentrop
Germany
fon +49 2721 71 77 -0
fax +49 2721 71 77 -255
info@medifa.com

we care.