





Nº	Denominación
1	4 patas ajustables para nivelar el suelo
2	Conmutador de pedal para las funciones de ajuste eléctrico
3	Cubeta de recuperación de instrumentos, blanca, extensible, giratoria
4	Soporte de los pies confort, incl. revestimiento de cuero sintético de los asideros, opcional (accesorio N.º de art. 81726_1)
5	Soporte de tapicería
6	Almohadón para la nuca con fijación magnética (accesorio N.º de art. 40023)
7	Porta-rollo de papel
8	Pinza de sujeción para adaptación de apoya-piernas
9	Conmutador principal (no visible, en el respaldo de la silla, con luz verde)

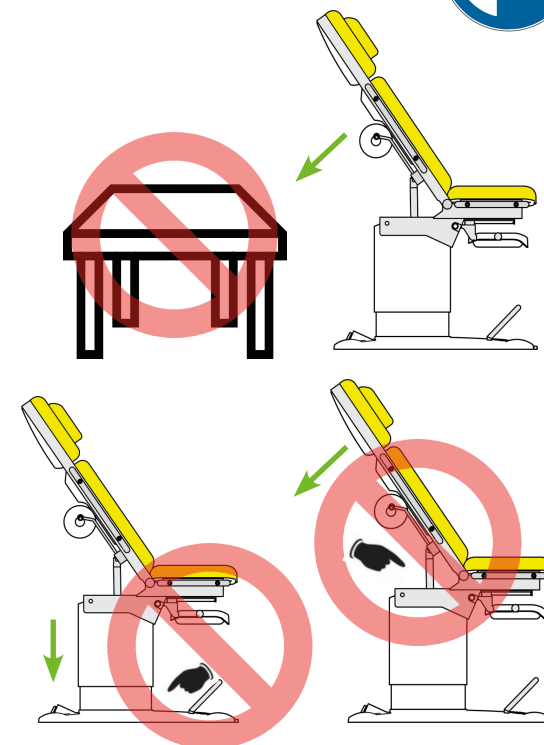

Pedal

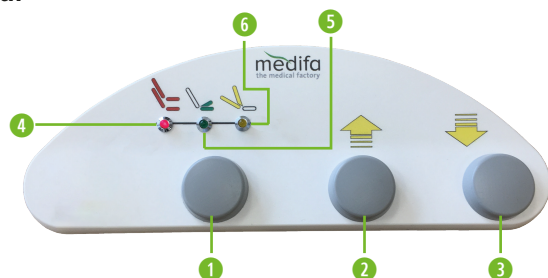

Nº	Función	Información
1	Tecla de selección de funciones	Preselección de las distintas funciones de almacenamiento. La función seleccionada se indica con el LED correspondiente.
2+3	Teclas de dirección	Teclas de dirección de la función correspondiente
4	LED de ajuste de altura	Indicador LED de la función de ajuste de la altura
5	LED de ajuste de la zona de la pelvis	Indicador LED de la función de ajuste de la zona de la pelvis
6	LED de ajuste del respaldo	Indicador LED de la función de ajuste del respaldo