

medifa

Member of REINSBERG® GROUP



medifa GmbH

we care.

Made in Germany



Kompetenz rund um den Operationssaal

Die medifa GmbH bietet als einer der führenden Hersteller von Medizinprodukten innovative Komplettlösungen und Produkte für den gesamten OP-Bereich in Krankenhäusern oder ambulanten OP-Zentren an. Das breite Portfolio umfasst modulare Raumsysteme, mobile OP-Tische, OP-Zubehör, mobile Carbon-OP-Tische, Operationsleuchten sowie Untersuchungs- und Behandlungstühle.

Die Entwicklung, Konstruktion und Produktion der medifa Produkte finden in Deutschland statt.

Mit einem großen Wertschöpfungsanteil in der Unternehmensgruppe garantiert medifa ihren Kunden schnelle Reaktionszeiten und eine hohe Qualität „Made in Germany“ gemäß zertifizierten nationalen und internationalen Qualitätsstandards.

medifa orientiert sich konsequent an den heutigen und zukünftigen Anforderungen der Kunden. Im Einklang mit dem Slogan „we care“ können sich Kunden aus aller Welt auf erstklassige Beratung, Qualität und Service aus einer Hand verlassen.

Als Teil der international agierenden Reinsberg Group gehört medifa zu einer dynamisch wachsenden Unternehmensgruppe.



medifa - Member of Reinsberg Group

Die Reinsberg Group vereint europäische Unternehmen, die sich auf hochwertige Lösungen im Gesundheitswesen spezialisiert haben. Unter der Dachmarke führt die Gruppe medifa, FAMED Zywiec, Brandon Medical, ALVO Medical und Protec. Sie tritt als aktiver, zuverlässiger Partner auf und unterstützt die angeschlossenen Unternehmen in ihrer globalen Wachstumsstrategie.

Durch Bündelung von Synergieeffekten kann sich die Reinsberg Group verstärkt auf die Förderung von Wissenschaft und Forschung konzentrieren und ihr Produktportfolio erweitern. Die kurzen Kommunikationswege in der Holdingstruktur ermöglichen es, schnell und kompetent auf neue

Marktanforderungen zu reagieren und neue Investitionsmöglichkeiten im MedTech-Bereich zu erschließen.

Ziel der Reinsberg Group ist es, eine leistungsstarke MedTech-Gruppe europäischer Medizintechnikhersteller aufzubauen, die ihren Kunden weltweit qualitativ hochwertige und dennoch erschwingliche Krankenhauslösungen und Produkte aus einer Hand anbietet. Die Reinsberg Group ist Teil der privaten Investmentgesellschaft BHM Group.



REINSBERG® GROUP

Leading Group of European
Healthcare Solutions

ALVO®
MEDICAL
Member of REINSBERG GROUP

Brandon
Medical.
Member of REINSBERG GROUP

FAMED
Zywiec
Member of REINSBERG GROUP

medifa
Member of REINSBERG GROUP

PROTEC
Member of REINSBERG GROUP

medifa H!Light

Operationsleuchte

Die medifa H!Light zeichnet eine hohe Funktionalität mit einem benutzerfreundlichen Bedienkonzept aus. Die Verwendung von hochwertigen Materialien und die spezielle antibakterielle Beschichtung des strömungsoptimierten Leuchtenkörpers erfüllen höchste hygienische Ansprüche.

Zusätzlich ermöglicht die sterile Bedienung der wesentlichen Funktionen höchste Flexibilität. Das aktive Schattenmanagement und der hohe Farbwiedergabeindex garantieren dem Operateur beste Arbeitsbedingungen im chirurgischen Alltag.

medifa H!Light

- Beleuchtungsstärke bis zu 160.000 lx
- Farbtemperaturverstellung 3.000 - 5.500 K
- Einstellung der Leuchtfeldgröße 15 - 30 cm
- Erweiterung mit aktivem Schattenmanagement
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse für optimale Wärmeableitung
- Antibakterielle Beschichtung des Leuchtenkörpers und der Kardanik
- Serienmäßiges Touch-Display



Universelle Handgriffaufnahme

- Aufnahme für sterile Handgriffe
- Optional Aufnahme für Einweghandgriffe
- Alle vier Bedienfunktionen jederzeit steril durch den Operateur einstellbar
- Werkzeugloser Wechsel von Bediengriff zu Full-HD- oder 4K-Kamera



Endoskopie-Modus

- Ambientlicht für endoskopische Eingriffe
- Farbe (RGB-Bereich) individuell programmierbar
- Einstellung über sterilen Bediengriff oder Touch-Display



Kameraintegration

- Serienmäßige Aufnahme für alle medifa Kamerasysteme
- Full-HD oder 4K (kabelgebunden oder kabellos)
- Wireless Kamera jederzeit nachrüstbar
- Monitorträger mit anschlagsfreier Signalübertragung (optional)



Wandbedienteil

- Bedienkonzept identisch mit Touch-Display am Leuchtenkörper
- Wandbedienteil als Aufputz- oder Unterputzausführung verfügbar
- Einbau und Integration in OP- Bedientableau möglich



Mobile Röntgen-OP-Tische

Die mobilen Röntgen-OP-Tische aus der medifa 8000 Serie verfügen über eine einzigartige Carbon-Liegefläche, die sich neben optimaler Röntgentransparenz insbesondere durch die ebenfalls aus Carbon gefertigten, integrierten Normschienen auszeichnet.

Die 360° durchleuchtbare Carbon-Tischplatte kann in Quer-, Längs- sowie Diagonalrichtung verschoben werden. medifa bietet einen elektrischen oder hybriden Antrieb mit einer zusätzlichen manuellen Free-Float-Option an. Der medifa 8000 ist in Kombination mit mobilen Röntgengeräten (wie z.B. einem C-Bogen) der ideale Partner für den Hybrid-OP.

8000 Hybrid

- Kardio-Vaskular
- Carbonplatte mit integrierten Normschienen
- Elektrische Längs-, Quer- und Diagonalverschiebung
- Manuelle Free-Float-Verschiebung
- Lateral- und Trendelenburgverstellung




8000

- Neuro- und Wirbelsäulenchirurgie, Endoskopie, Schmerztherapie, Bronchoskopie
- Carbonplatte mit integrierten Normschienen
- Elektrische Längs-, Quer- und Diagonalverschiebung
- Lateral- und Trendelenburgverstellung



Maximale Röntgenfreiheit

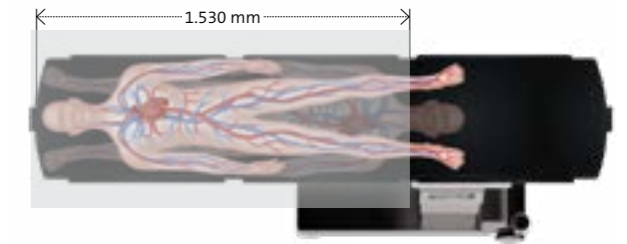

Manuelle und/oder elektrische Längs-, Quer- und Diagonalverschiebung



Integrierte Carbon-Führungsschienen ohne Metallverschraubungen



medifa 7000 6000 5000

OP-Tische

Die mobilen Operationstische von medifa bieten höchstmögliche Flexibilität für den Operationssaal. Hochwertige Materialien, flexible Lagerungsmöglichkeiten, Nutzerfreundlichkeit und

eine durchdachte Zubehörpalette ermöglichen eine perfekte Patientenlagerung für alle chirurgischen Disziplinen.

- Universal-Schwerlast-OP-Tische
- Bis zu drei elektrisch angetriebene Gelenke innerhalb der Tischplatte
- Optionaler Fahrtrieb
- Maximal zulässige Gesamtbelastung bis zu 544 kg



- Allround-OP-Tische
- Elektrohydraulische Antriebe
- Elektrische Bremse
- Maximal zulässige Gesamtbelastung bis zu 454 kg



5000

- Ambulanz-OP-Tische
- Elektrisch oder manuell angetriebene Modelle
- Zentrale mechanische Fußbremse
- Maximal zulässige Gesamtbelastung bis zu 250 kg



medifa OP-Tisch-Zubehör

Auswahl universelles Zubehör

Eine Vielzahl von Anbauzubehör ergänzt die disziplinären Einsatzmöglichkeiten der Operationstische.

Das medifa Normschienenzubehör bietet eine optimale Ergänzung auch für vorhandene Bestands-OP-Tische.

Auszug medifa Sortiment

Armauflagen

- Flexible Positionierung durch zentrale Feststellschraube
- Mit Schnellspannkloben



Orthopädie-Zubehöre

- Intraoperative Positionierung des Knies
- Alternativ auch mit elektrischem Antrieb
- Universelle Anpassung an Breite, Höhe und Beinlängen



Beinhalter

- Universelle Klobenvarianten
- Stufenlose Positionierung der Beine
- Gasfederunterstützte Einhandbedienung



medifa Raumsysteme für höchste Hygieneanforderungen



medifa Raumsysteme für höchste Hygieneanforderungen

Wand- und Türsysteme

- Wandsysteme in verschiedenen Ausführungen
- Strahlen- und Laserschutz verfügbar
- Drehflügeltüren – ein- oder zweiflügelig
- Schiebetüren – ein- oder zweiflügelig
- Glastüren und hermetische Türen
- Fenster mit oder ohne Jalousie
- Verschiedene Farben und Designs möglich



Design

- Bedruckte Wandelemente und Türsysteme in verschiedenen Designs und Materialien
- Bedruckte Wand-Glaselemente, auch erhältlich mit LED-Beleuchtung
- Design-Deckenpaneele mit LED-Beleuchtung



Chirurgische Waschplätze

- Waschtische und Waschrinnen in verschiedenen Designs und Ausführungen
- Ausführung in Edelstahl, Acryl und Mineralwerkstoffen
- Berührungslose oder manuelle Mischbatterien
- Seifen- und Desinfektionsspender



OP-Deckensysteme

- Metallkassetten-Deckensystem
- Raumbeleuchtung in verschiedenen Ausführungen
- Integrationsmöglichkeit für Lüftungsdecken und Zuluftelemente
- Bauseitige Integration von Einbauelementen, wie z.B. Kameras oder Sensoren im Deckensystem möglich



Schränke und Schrankanlagen

- Flächenbündig einbaufähige Schränke
- Freistehende Schrankanlagen für verschiedene Anwendungsbereiche
- Inneneinrichtung mit Korbsystemen oder Zwischenböden



OP-Integration, Monitore und Displays

- OP-Managementsystem medifa Integra
- Monitore, Displays, OP-Bedientableaus in verschiedenen Ausführungen
- Flächenbündig verbaut in medifa Wandsystem



medifa 4000

Untersuchungsstühle

Mit den Untersuchungsstühlen von medifa erfolgt die Positionierung der Patienten einfach und schnell. Bei den Modellen der Behandlungsstühle mit Memorypositionen können durch Tastendruck am Handschalter oder Fußpedal bis zu 12 vorher individuell eingespeicherte Positionen abgerufen werden. Der Untersuchungsstuhl führt alle Bewegungen ergonomisch, behutsam und somit angenehm für den Patienten aus.

Modellauswahl

- Basismodell mit drei Motoren und Fußschalter
- Erweiterung auf Memorypositionen und elektrische Beinverstellungen
- Bis zu vier Benutzerebenen



Gynäkologie, Urologie und Proktologie

- Individuelle Konfiguration für jede Fachrichtung
- Auswahl verschiedener Lagerungs- und Anwendungssysteme
- Möglichkeit der Flach- und Schocklagerung
- Maximal zulässige Gesamtbelastung 250 kg



Zubehöre

- Kolposkophalterung für gängige Marktsysteme
- Führungsschienen für externes Zubehör
- Universelle Edelstahlchalen



medifa 3000

Funktionsmobiliar

Das Funktionsmobiliar von medifa bietet Sicherheit und hohe Qualität in jeder Beziehung. Das Programm beinhaltet eine Fülle von cleveren und mobilen Helfern für alle Funktionsbereiche einer Klinik.

Bei allen Produkten, ob Sitz- oder Einrichtungsmobiliar, stehen Flexibilität und Hygiene im Vordergrund.

Auszug medifa Sortiment

Instrumentenzureichetische

- Höhenverstellung manuell oder hydraulisch
- Maximale Belastbarkeit 30 kg
- Hochwertige Edelstahlkonstruktion



Instrumententische

- Verschiedene Größen
- Maximale Belastbarkeit 50 kg
- Hochwertige Edelstahlkonstruktion



Fahrdrehstuhl und OP-Hocker

- Verschiedene Sitzoptionen
- Höhenverstellung mit Fußauslösung
- Feststellbare Rollen



medifa

Member of REINSBERG® GROUP



sales@medifa.com

Projektanfragen

medifa GmbH

Industriestraße 5
57413 Finnentrop
Deutschland
fon +49 2721 71 77 -0
fax +49 2721 71 77 -255
www.medifa.com
info@medifa.com

Version 01-24-DE

Toleranz $\pm 10\%$; technische Änderungen vorbehalten

we care.



Made in Germany