



## medifa 2000

Tables  
multifonction



we care.

- Design moderne et ergonomique
- Liberté des pieds grâce à la construction spéciale du pied en Y
- Possibilités optimales de nettoyage et de désinfection
- Concept de commande au pied convivial pour l'utilisateur
- Partie tête réglable électriquement de série
- Moteurs avec fonction de sécurité pour la protection contre anti-pincement et anti-écrasement
- Colonnes d'élévation réglables individuellement ou en parallèle
- Réglage possible en proclive / en déclive
- Hauteur variable adaptée pour les personnes âgées et/ou handicapées
- Multiples choix de couleur



# Fonctionnalité et Design



Altura regulable de  
580 a 980 mm



Réglages en proclive / en declive  
de  $-22^{\circ}$  à  $+22^{\circ}$



Réglage appui-tête de  
 $-27^{\circ}$  à  $+40^{\circ}$



Réglage dossier de  
 $0^{\circ}$  à  $+46^{\circ}$



## Table multifonction

### 112802

- Réglage électrique réalisé par commande au pied facile à utiliser
- Réglage électrique de la hauteur de 580 à 980 mm
- Réglage électrique de l'inclinaison de l'appui-tête (+ 40° / - 27°)
- Réglage électrique en proclive / en déclive (+22° / -22°)
- Châssis en blanc (RAL 9010)
- Épaisseur du matelas: 70 mm
- Charge admissible jusqu'à 225 kg
- Surface divan: 1960 x 650 mm
- Encombrement: 1750 x 620 mm
- Raccordement au réseau: 230 V / 50-60 Hz

## Accessoires représentés:

### 85200

Rails latéraux

### 83201

Appui-tête avec fente nasale, avec coussin amovible



## Table multifonction

### 112805

- Réglage électrique réalisé par commande au pied facile à utiliser
- Réglage électrique de la hauteur de 580 à 980 mm
- Réglage électrique de l'inclinaison de l'appui-tête (+ 40° / - 27°)
- Réglage électrique en proclive / en déclive (+22° / -22°)
- Réglage dossier de 0° à +46°
- Châssis en blanc (RAL 9010)
- Épaisseur du matelas: 70 mm
- Charge admissible jusqu'à 225 kg
- Surface divan: 1960 x 650 mm
- Encombrement: 1750 x 620 mm
- Raccordement au réseau: 230 V / 50-60 Hz

## Accessoires représentés:

### 112898

Mobile

### 85200

Rails latéraux

### 81700

Appui-jambes de Goepel Classic, paire

### 81710

Revêtement de la coquille d'appui-jambes en cuir synthétique

### 1128530

Poignées, blanches

### 28531

Revêtement des poignées

	Plage de réglage	112802	112805
Réglage de la hauteur	580 - 980 mm	●	●
Réglage en proclive/déclive	-22° / +22°	●	●
Réglage appui-tête	-27° / +40°	●	●
Réglage dossier	0° / 46°		●
Mobilité		◆	◆
Charge admissible		225 Kg	225 Kg

● Électrique ◆ En option

### Caractéristiques techniques

Classe MPG: I  
 Classe de protection: I  
 Type de protection: IPX4  
 Raccordement en 230 V

### Matelas




- Forme ergonomique du matelas
- Bords et angles arrondis
- Revêtement en cuir synthétique haute qualité
- Fabrication sans couture
- Possibilités optimales de nettoyage et de désinfection
- Différents coloris disponibles sans supplément
- Avec fixation magnétique du coussin de tête








-50	-56	-63	-67	-75
Blanc	Beige	Citron	Limonade	Agave
-73	-61	-65	-53	-58
Abricot	Cornaline	Cerise	Perle	Stone
-55	-62	-74	-80	-81
Dauphin	Bleu	Atoll	Royal	Violette
-107	-83	-96		
Gris graphite	Noir	Noir, antistatique		

# Caractéristiques techniques

Modèles 112802

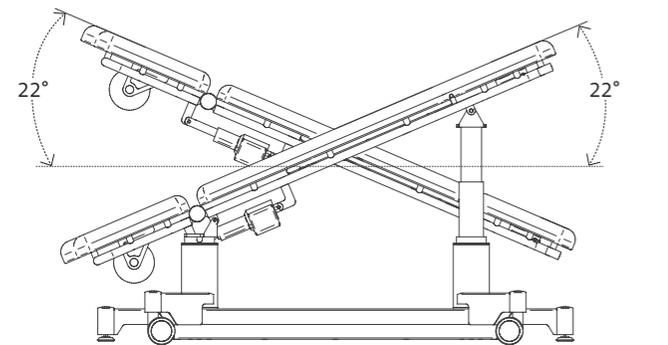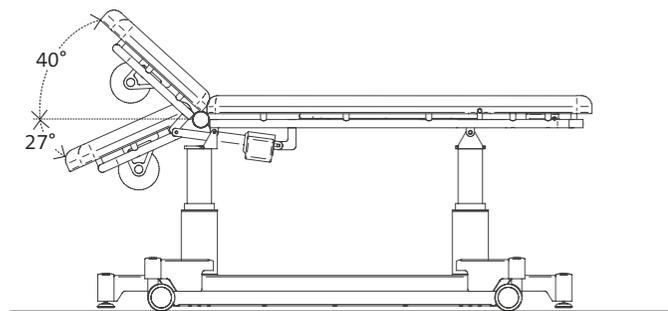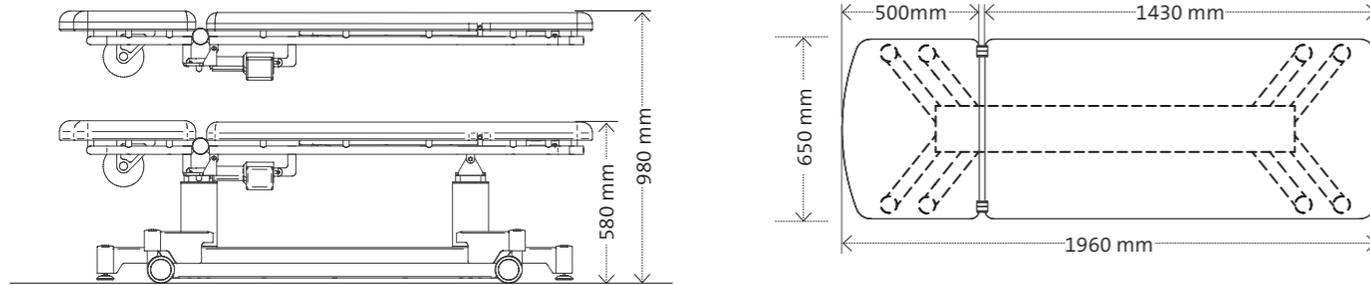

Modèles 112805

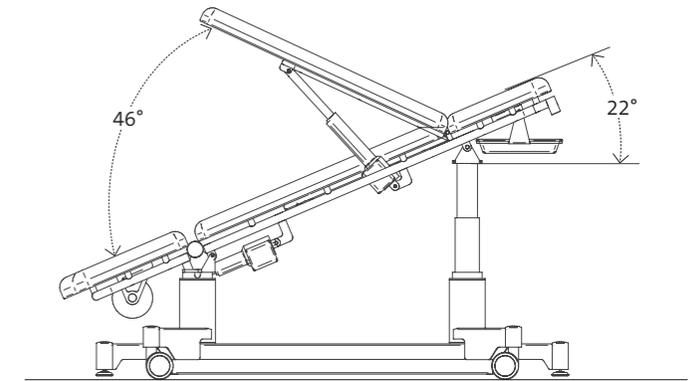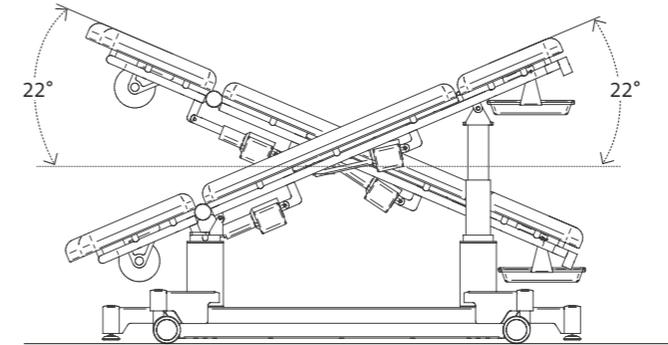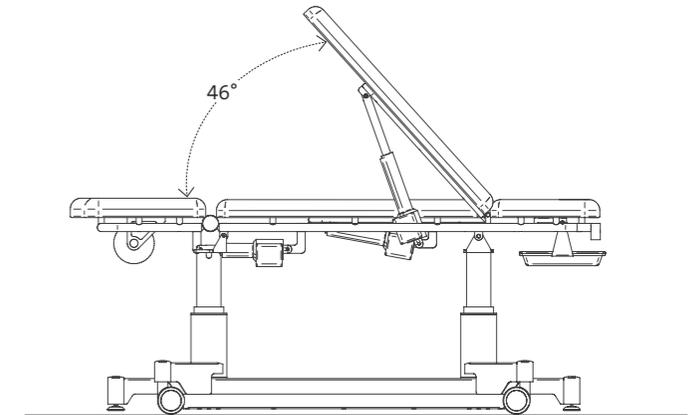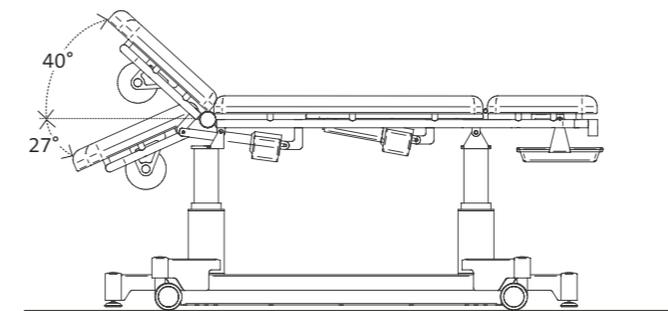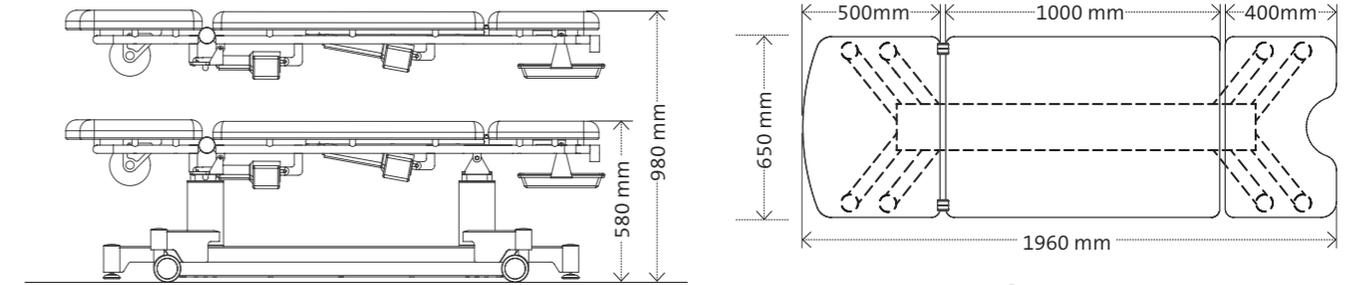



**Réf. 28013**  
Traversin



**Réf. 83201**  
Appui-tête avec fente nasale, avec coussin amovible




**Réf. 85200**  
Rails latéraux pour monter des accessoires (paire) L = 600 mm



**Réf. 112898**  
Mobile blanc (RAL 9010)



**Réf. 81001**  
Support pour accrocher une tringle porte-rouleau de papier (en combinaison avec la réf. 81524)

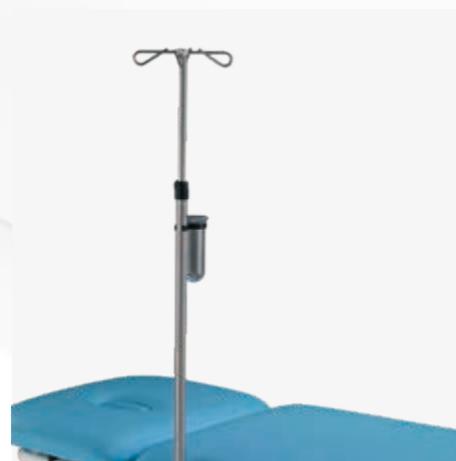

**Réf. 81524**  
Tringle porte-rouleau de papier, L = 650 mm



**Réf. 1128530**  
Poignées blanches RAL 9010, paire




**Réf. 28531**  
Revêtement des poignées en cuir synthétique dans la couleur du matelas, paire

**Réf. 81800**  
Potence à perfusion extensible, avec 4 crochets et collecteur de gouttes, avec étai


**Réf. 112899\_P**  
Liaison équipotentielle au niveau du socle

**Réf. 112899\_S**  
Verrouillage su socle

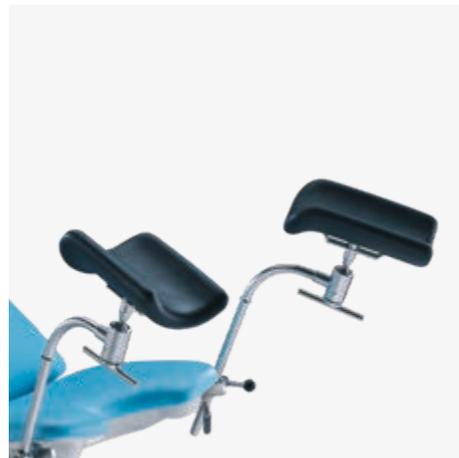

**Réf. 81700**

Appui-jambes de Goepel Classic avec coquille d'appui-jambes en mousse de polyuréthane noire, paire, sans clameaux de serrage (61511)

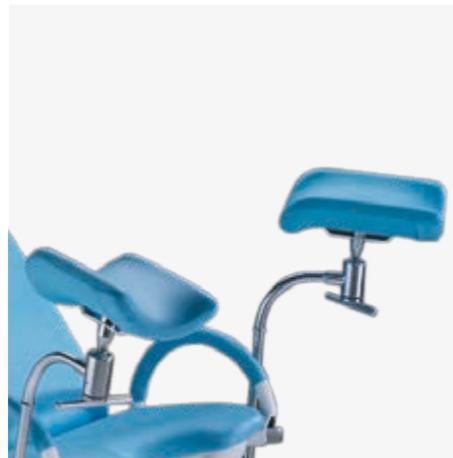

**Réf. 81710**

Revêtement de la coquille d'appui-jambes en cuir synthétique dans la couleur du matelas, paire



**Réf. 61511**

Clameau de serrage pour fixation des accessoires sur le rail porte-accessoires, pour tiges de 18 mm de diamètre, pivotant



**Réf. 61211**

Appui-bras, pivotant et basculant par joint à rotule, réglable en hauteur et à l'horizontale, matelas antistatique, incluant fixation au rail et sangle de fixation, dimensions (matelas): L x l x h = 400 x 115 x 40 mm

**medifa healthcare group rassemble sous une même entité toutes les compétences en matière de salle d'opération.**

medifa est un fournisseur de solutions technologiques médicales complètes, géré par son propriétaire et actif dans le monde entier.

La gamme de produits et de services couvre la gamme complète des systèmes modulaires de cloisons, portes, plafonds et armoires (RooSy® Room Systems) pour salles d'opération clés en main, ainsi que les tables d'opération mobiles avec accessoires et éclairages opératoires jusqu'aux tables et mobilier pour examens. L'un des plus grands fournisseurs « Fabricant

d'Équipement d'Origine » allemands dans le secteur de la technique médicale fait également partie de medifa.

Dans ce groupe, nous retrouvons medifa GmbH & Co. KG à Finnentrop (tables d'opération), medifa hygienic rooms GmbH à Ötigheim (systèmes d'aménagement modulaire) et medifa metall und medizintechnik GmbH (composants de table d'opération) à Rastatt. Le groupe medifa healthcare emploie environ 350 personnes sur trois sites en Allemagne.


La planification, l'ingénierie et la fabrication sont entièrement effectuées en Allemagne. Sa valeur ajoutée de plus de 90 % rend le groupe pratiquement indépendant des fournisseurs tiers.

Sous la devise „we care“, medifa entend l'orientation cohérente suivant les besoins de ses clients. Les clients du monde entier peuvent compter sur un conseil, un traitement et une qualité de premier ordre d'une seule main, fabriqués en Allemagne selon des normes de qualité nationales et internationales certifiées.

**Produits**

- Systèmes de salles d'opération modulaires (RooSy)
- Tables d'opération mobiles et accessoires
- Éclairages opératoires (H!Light)
- Tables d'examen et de traitement
- Mobilier et chariots médicaux fonctionnels
- Solutions de conceptions spéciales

**medifa dans le monde**

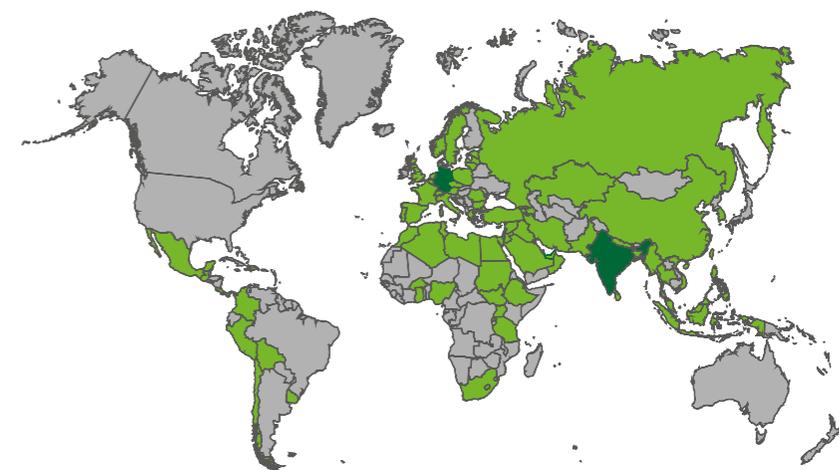

we care.



Version 02-21-FR  
Sous réserve de modifications dues au développement technique.

[www.medifa.com](http://www.medifa.com)

we care. Code



**medifa GmbH & Co. KG**

Industriestraße 5  
57413 Finnentrop  
Germany  
fon +49 2721 71 77 -0  
fax +49 2721 71 77 -255  
[info@medifa.com](mailto:info@medifa.com)

we care.