




medifa 8000

Table mobile
d'opération et d'imagerie

Les avantages en un coup d'œil

- Plateau de table haut de gamme en carbone ergonomique et entièrement radiotransparent
- Rails de guidage en fibres de carbone intégrés sur le côté tête et latéralement
- Le partenaire idéal dans la salle d'opération hybride
- 1,300 mm de transparence d'images à 360°
- Plateau de table à translation longitudinal et transversale
- Possibilités de nettoyage et de désinfection optimales grâce aux surfaces en acier inoxydable poli
- Design moderne et protection anti-corrosion par l'utilisation d'acier inoxydable poli
- Liberté optimale pour les pieds grâce à une construction spéciale du socle
- Concept de contrôle convivial
- Une large gamme d'accessoires radiotransparents
- Charge maximale admissible 250 kg

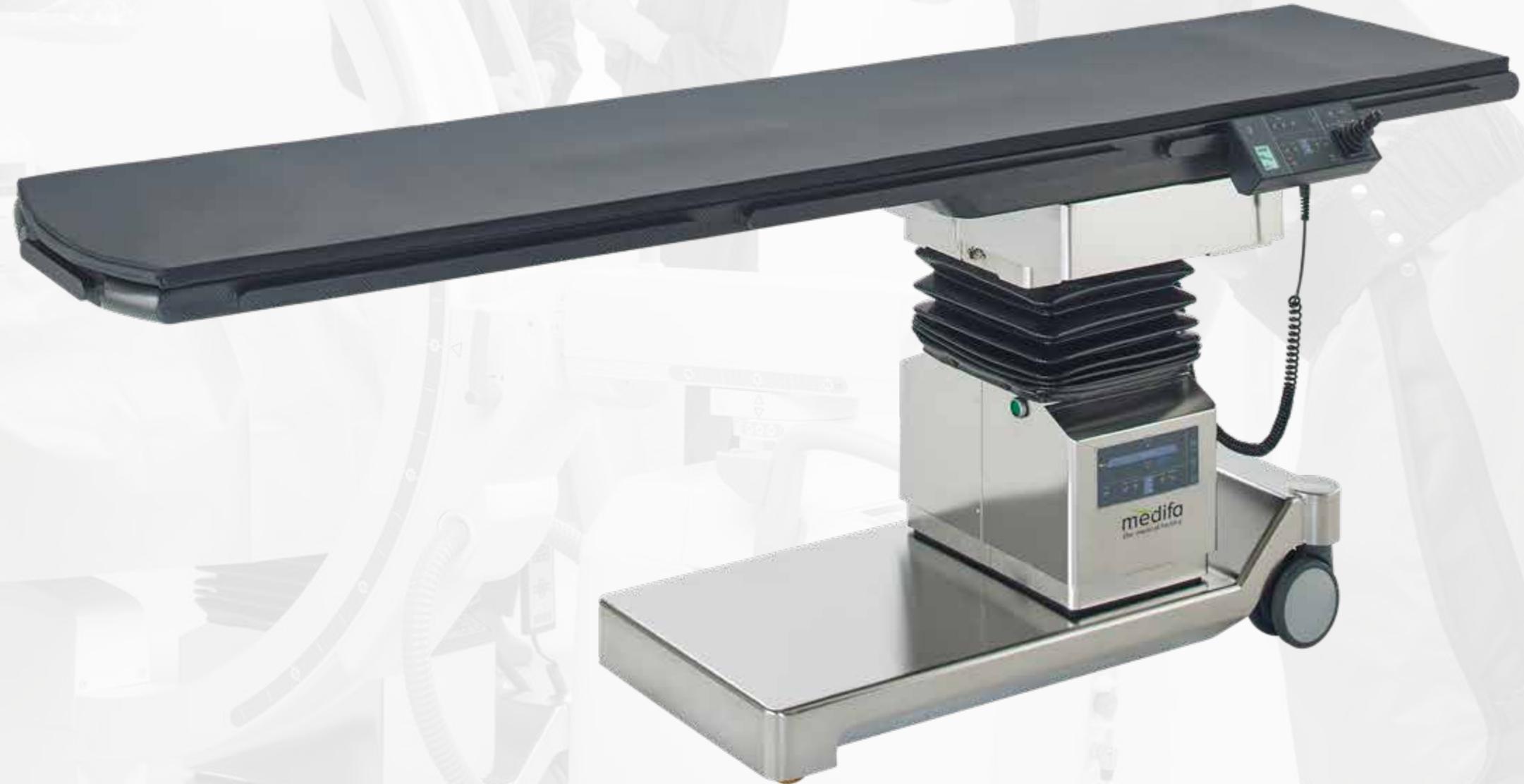

Fonctionnalité et confort



La combinaison entre table d'imagerie et table d'opération fait du système medifa 8000 le partenaire idéal dans l'opération hybride afin de rendre les processus de travail plus rapides, plus simples et donc plus efficaces.



Transparence d'images entière d'une longueur jusqu'à 1,530 mm (1,300 mm de transparence d'images à 360°).

Concept d'utilisation



- Bouton marche/arrêt
- Versions pouvant adopter jusqu'à trois positions d'utilisation
- Capable de mémoriser jusqu'à trois positions d'utilisation
- Touche de changement de direction pour joystick
- Joystick pour translation longitudinal et transversale
- Mode inversé
- Touches pour les réglages
- Position zéro (réglages simultanés)
- Ecran couleur

Possibilités de commande

1. Standard: Console de commande avec joystick, écran couleur intégré et témoin de batterie
2. Standard: Commande additionnelle intégrée au pilier pour des fonctions électriques
3. En option: Télécommande manuelle infra rouge sans fil, avec écran couleur intégré et témoin de batterie (réf. 804070)
4. En option: Commande à pédale pour les fonctions basiques hauteur, proclive /déclive, inclinaison latérale (réf. 804060)





Table mobile d'opération et d'imagerie

Réf. 800200

- Plateau de table en fibres de carbone entièrement radiotransparent
- Plateau de table avec rails latéraux en fibres de carbone pour fixation d'accessoires
- Rails latéraux supplémentaires en carbone à la tête et au pied
- Console de commande avec écran couleur et joystick pour fonctions électriques
- Panneau de commandes supplémentaire pour les fonctions électriques sur la colonne de la table
- Plateau de table à translation longitudinale de 300 mm
- Plateau de table à translation transversale de 180 mm
- Réglage de la hauteur de 750 à 1,110 mm

- Réglage en proclive / en déclive de -25° à $+25^{\circ}$
- Réglage latéral de -20° à $+20^{\circ}$
- Sauvegarde et appel jusqu'à trois fonctions d'utilisation quelconques (fonction de mémoire)
- Mobilité grâce à deux doubles roulettes pivotantes \varnothing 125 mm et quatre roulettes fixes \varnothing 80 mm avec frein central
- Batteries et chargeur intégrés dans la table
- Indicateur de la capacité des batteries à la console de commande
- Fonctionnement sur secteur 110V ou 220V / 50-60 Hz
- Charge maximale admissible 250 kg
- Dimensions surface de couchage (L x l): 2335 x 540 mm
- Poids de la table: 250 kg



- La colonne mince de la table et son socle plat permettent un positionnement optimal de l'ampli de brillance.
- Rails latéraux en carbone intégrés pour la fixation d'une large gamme d'accessoires radiotransparents.

Recommandation de configuration

Réf. 800200

Table mobile d'opération et d'imagerie

Réf. 81220_1

Appui-bras

Prix sur demande!

Domaines spécialisés

- Chirurgie cardio-vasculaire
- Chirurgie vasculaire
- Neurochirurgie
- ERCP
- Thérapie de douleur

Modèles



Plage de réglage **800200**

| | | | |
|--|--|----------------|---|
| | Réglage de la hauteur | 750 - 1,110 mm | ● |
| | Réglage en proclive / en déclive | -25° / +25° | ● |
| | Réglage latéral | -20° / +20° | ● |
| | Plateau de table à translation longitudinale | 300 mm | ● |
| | Plateau de table à translation transversale | 180 mm | ● |
| | Mobilité | | ■ |
| | Frein central | | ■ |
| | Fonction de mémoire (trois fonctions) | | ● |
| | Charge maximale admissible | 250 kg | |

● Électrique ■ Manuel

Positionnements



Positionnement du patient pour chirurgie cardio-vasculaire avec anneau de tête



Positionnement du patient pour chirurgie vasculaire avec anneau de tête



Positionnement du patient pour neurochirurgie, chirurgie du rachis et ORL avec calotte de tête et appui-bras




Positionnement du patient pour neurochirurgie avec système de serrage crânien et appui-bras


Caractéristiques techniques

- Radiotransparence d'images entière d'une longueur jusqu'à 1,530 mm (1,300 mm de transparence d'images à 360°)
- Jusqu'à 1,850 mm de radiotransparence d'images entière (1,600 mm de radiotransparence d'images à 360°) lors du montage d'un appui-tête optionnel (ref. 811076 ou 811078)
- Surface de couchage d'une longueur totale de 2,335 mm, appropriée pour toute taille du patient
- Surface de couchage extensible en largeur jusqu'à 640 mm par montage des éléments d'élargissement radiotransparents en option (ref. 81355)








Plateau de table à translation horizontale (à gauche)

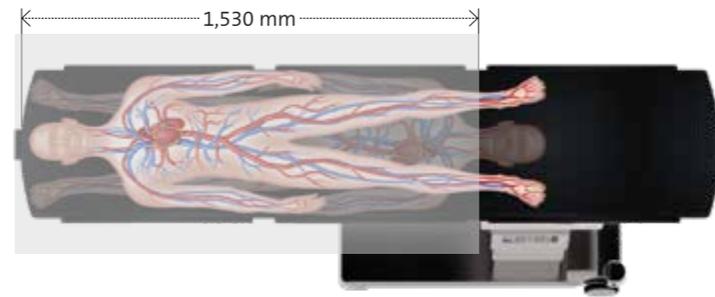

Mise à zéro

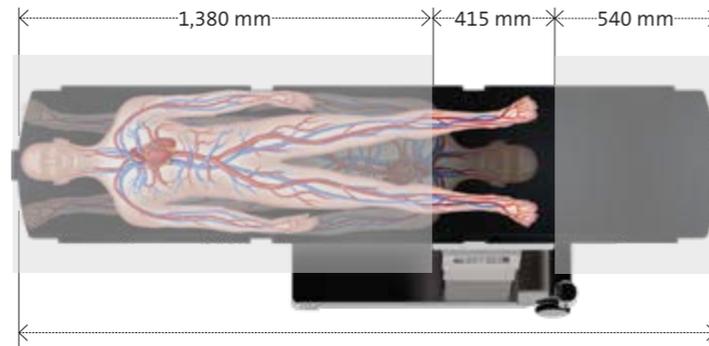

Plateau de table à translation horizontale (à droite)

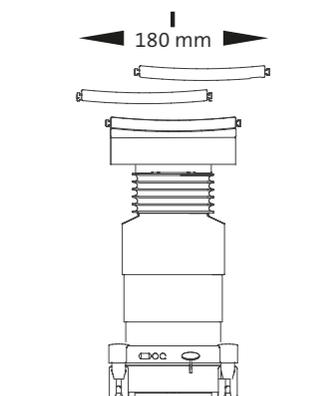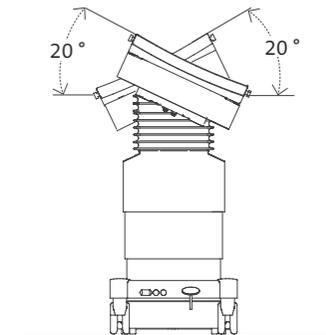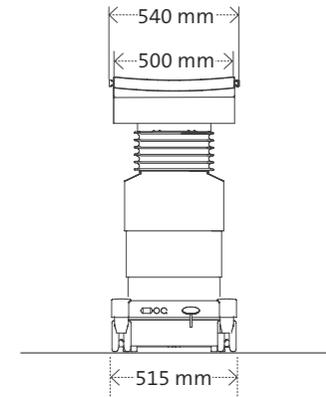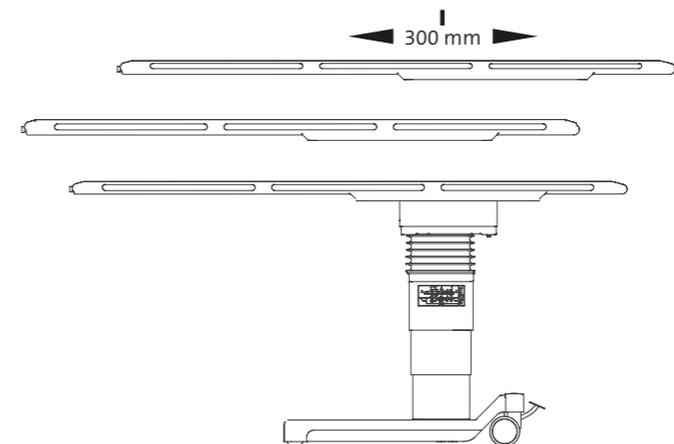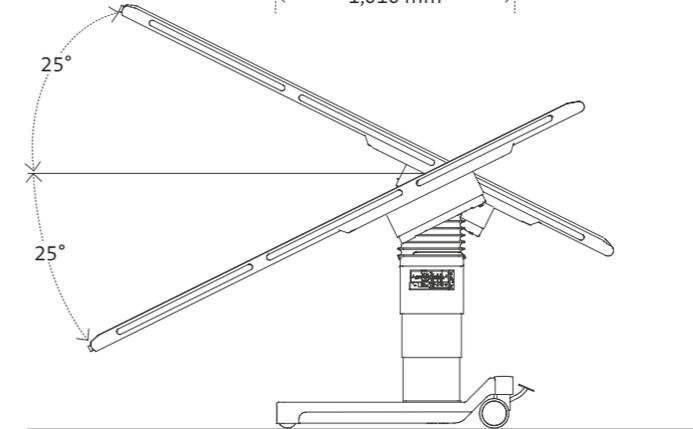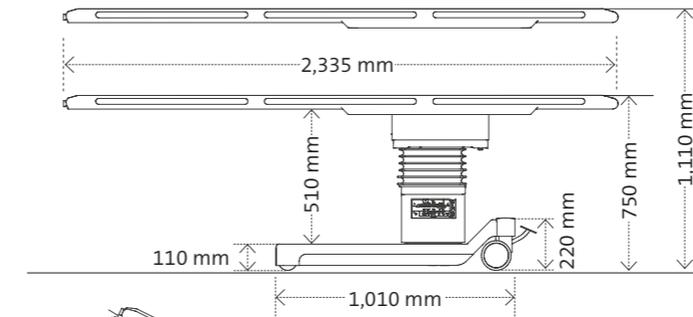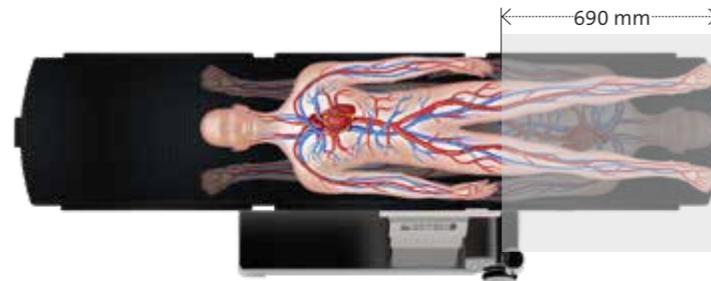

Accessoires pour medifa 8000



Commande au pied pour medifa 8000

Réf. 804060

- Pour réglage de la hauteur, inclinaison latérale, proclive et déclive
- Avec câble



Telecommande manuelle infrarouge pour medifa 8000

Réf. 804070

- Transmission de données sans fil
- Avec touches pour toutes fonctions électriques
- Avec station de charge



Support télécommande

Réf. 61575

- Fixation au rail latéral ou au rail côté tête
- Inclinaison
- Matériel: Acier inoxydable



Clameau de serrage

Réf. 81511

- Pour fixation des accessoires sur le rail porte-accessoires, pour tiges de 16-18 mm de diamètre
- Pivotant



Arceau d'anesthésie

Réf. 81750

- Extensible des deux côtés
- Clameau de fixation inclus, sans fixe-bras



Arceau d'anesthésie flexible

Réf. 81751

- Souple
- Réglable individuellement
- Clameau de fixation inclus
- L: 2,000 mm

Accessoires pour medifa 8000



Tige porte-sérum

Réf. 81815

- Clameau de fixation inclus
- Télésopique
- 4 crochets



Fixe-corps ou -jambes

Réf. 81405

- Réglable en continu
- Avec fermeture velcro



Fixe-poignet (paire)

Réf. 81406

- Pour la fixation de la main ou du bras
- Clameau de fixation inclus



Bras d'articulation avec calotte de tête

Réf. 81110

- Positionnement flexible de calotte de tête par trois articulations
- La vis centrale fixe les trois articulations solidement
- Pour la position dorsale ou ventrale
- En forme ovale
- Matelas: PUR, antistatique



Calotte de tête pour adultes (DORO)

Réf. 811076

- Matelas amovibles en gel, fixation incluse
- Pour la position dorsale ou ventrale
- Radiotransparent
- Inclus: 561060 - Adaptateur pour accessoire, 561061 - Raccord court, 561062 - Raccord long, 561067 - Adaptateur serre-crâne, 561079 - Calotte de tête adultes



Calotte de tête pour enfants (DORO)

Réf. 811078

- Matelas amovibles en gel, fixation incluse
- Pour la position dorsale ou ventrale
- Radiotransparent
- Inclus: 561060 - Adaptateur pour accessoire, 561061 - Raccord court, 561062 - Raccord long, 561067 - Adaptateur serre-crâne, 561079 - Calotte de tête enfants

Accessoires pour medifa 8000



Système de serrage de la tête (DORO)

Réf. 811069

- Pour fixation de la tête lors d'interventions neurochirurgicales
- Radiotransparent
- Fixation incluse
- Inclus: 561060 - Adaptateur pour accessoire, 561061 - Raccord court, 561062 - Raccord long, 561067 - Adaptateur serre-crâne, 561068 - Serre-crâne
- Pointes 811073 ou 811074 à commander séparément



Pointe pour adultes (DORO)

Réf. 811073

- Réutilisable, 3 pièces, Matériel: Titane
- Adaptable à: 811069

Pointe pour enfants (DORO)

Réf. 811074

- Réutilisable, 3 pièces, Matériel: Titane
- Adaptable à: 811069



Dispositif de positionnement pour interventions sur la colonne vertébrale

Réf. 81900

- Avec manivelle
- Radiotransparent
- Accès illimité de l'ampli de brillance
- Réglable en largeur pour une adaptation individuelle au patient
- Capacité de: 227 kg



Appui-bras

Réf. 81220_1

- Pivotant
- Radiotransparente
- Avec matelas et etaux à fixation rapide
- L x l: 650 x 140 mm
- Matelas: Mousse avec similibucir, H = 20 mm, antistatique
- Disponible également avec hauteur de matelas: H = 40 mm (Réf. 81220_2) et H = 60 mm (Réf. 81220_3)



Appui-bras

Réf. 81218

- Clameau et sangle de fixation inclus
- Positionnement flexible du bras par trois articulations
- Vis centrale pour un positionnement et une fixation rapide du bras articulé
- Matelas pivotant basculant par articulation à rotule
- Matelas: Visco-élastique, L x l x H: 500 x 115 x 80 mm, antistatique, amovible



Protection du bras

Réf. 81345

- Avec matelas
- L x H: 410 x 180 mm

Accessoires pour medifa 8000



Table d'opération mains-bras

Réf. 81230

- Plateau en fibre de carbone offrant une radiotransparence excellente
- Clameau à fixation rapide, matelas et pied de support inclus
- L x l: 815 x 430 mm
- Matelas: Visco-élastique mousse, H = 30 mm, antistatique



Appui-latéral / appui-bras

Réf. 81092


- Assure un positionnement stable du bras
- Réglable en trois positions (droite, horizontale, vers le bas)
- L x H: 600 x 140 / 235 mm
- En option: Matelas mousse revêtue de similicuir, H = 20 mm, antistatique (réf. 56031)



Adapteur pour rails de guidage

Réf. 81560

- Connecteurs rapide inclus
- Pour fixer des accessoires externes
- L: 200 mm

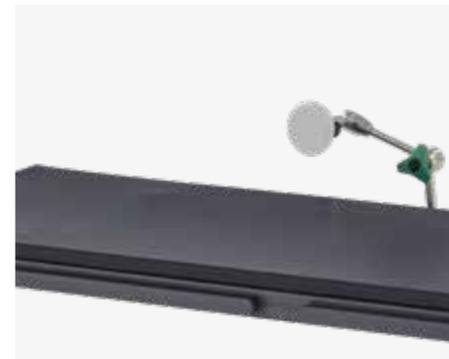

Pièce de raccordement

Réf. 81637

- Pour supports de corps
- Réglable en hauteur et amovible
- Pivotante par 360°
- Supports de corps réglables par rotule
- Clameau inclus



Support pubis, sacrum et sternum

Réf. 61361_1

- Pubis, sacrum et sternum
- Matelas: PUR, Ø: 100 mm, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable
- Adaptable à: 61361, 61367 et 81367



Support épaule et latéral

Réf. 61361_2

- Matelas: PUR, L x l: 220 x 110 mm, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable
- Adaptable à: 61361, 61367 et 81367

Accessoires pour medifa 8000



Support dorsal et fessier

Réf. 61361_3

- Matelas: PUR, L x l: 220 x 110 mm, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable
- Adaptable à: 61361, 61367 et 81367



Rouleau

Réf. 61361_4

- De support pour la position latérale
- Matelas: PUR, L x Ø: 190 x 100 mm, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable
- Adaptable à: 61361, 61367 et 81367



Éléments d'élargissement (paire)

Réf. 81355_1

- Radiotransparent
- Rails de guidage intégrés
- L x l: 600 x 50 mm
- Matelas: Mousse avec simlicuir, H = 20 mm, antistatique
- Egalement disponible en hauteur de matelas H = 40 mm (Réf. 81355_2) et H = 60 mm (Réf. 81355_3) en optio



Protection contre le rayonnement diffusé

Réf. 81040

- Fixation incluse
- Protège le bas du corps de l'utilisateur contre les rayons X
- Trois parties (chaque 750 x 290 mm)



Protection contre le rayonnement diffusé

Réf. 81045

- Fixation incluse
- Protège le bas du corps contre les rayons X
- Trois parties inférieurs (chacune 750 x 290 mm)
- Quatre parties supérieures (chacune 270 x 180 mm)



Coussin repose-tête

Réf. 61147

- Pour positionnement du patient en décubitus dorsal
- Radiotransparent
- L x l: 250 x 250 mm
- Matériel: PUR, antistatique

Accessoires pour medifa 8000



Coussin matelassé

Réf. 61900

- Pour positionnement du patient lors d'opérations des disques intervertébraux et du rachis
- Radiotransparent
- L x l x H: 820 x 450 x 90 mm
- Matériel: Visco-élastique mousse, antistatique



Anneau de tête, Ø 200 mm

Réf. 61115

- Hauteur: 45 mm, Ø (extérieur): 200 mm

Anneau de tête, Ø 140 mm

Réf. 61115_2

- Hauteur: 35 mm, Ø (extérieur): 140 mm

Anneau de tête, Ø 90 mm

Réf. 61115_3

- Hauteur: 20 mm, Ø (extérieur): 90 mm



Coussin de tête pour adultes

Réf. 61910

- Pour positionnement du patient en décubitus ventral
- L x l x H: 280 x 240 x 150 mm

Coussin de tête pour enfants

Réf. 61911

- Pour positionnement du patient en décubitus ventral
- L x l x H: 260 x 230 x 140 mm



Petit coussin semi-circulaire en gel de silicone

Réf. 61920

- L x l x H: 305 x 100 x 75 mm

Moyen coussin semi-circulaire en gel de silicone

Réf. 61921

- L x l x H: 405 x 100 x 75 mm

Grand coussin semi-circulaire grand en gel de silicone

Réf. 61922

- L x l x H: 510 x 100 x 75 mm



Talonnière en gel de silicone (paire)

Réf. 61940

- Pour positionnement du patient en décubitus dorsal
- Pour prévention des blessures au talon
- L x l x H: 190 x 100 x 70 mm



Matelas pour medifa 8000

Réf. 800020

- Visco-élastique mousse, L x l x H: 2,340 x 540 x 20 mm
- Egalement disponible en hauteur de matelas H=40 mm (Réf. 800040) et H = 60 mm (Réf. 800060) en option

Accessoires complémentaires

Une vaste gamme d'accessoires à fixer pour différents domaines chirurgicaux.

Chariot porte-accessoires (ref. 341045) d'acier inoxydable pour le stockage central des accessoires.

Il comprend: 5 emplacements pour éléments avec matelas, 5 rails (25 x 10 mm) pour les accessoires ainsi qu'un rangement pour les objets de petite taille.



medifa

Compétence autour de la salle d'opération

En tant que fabricant leader international de dispositifs médicaux, medifa propose des solutions et des produits innovants pour les salles d'opération, les systèmes chirurgicaux hybrides mobiles et d'autres domaines dans les hôpitaux ou les centres de chirurgie ambulatoire.

Le large portefeuille de produits comprend des tables d'opération mobiles et des accessoires chirurgicaux, des tables d'opération mobiles en carbone, des éclairages opératoires (medifa H!Light) ainsi que des fauteuils d'examen et de traitement pour la gynécologie, l'urologie et la proctologie.


Le développement, la construction et la production se réalisent en Allemagne. Avec une grande part de valeur ajoutée dans le groupe, l'entreprise garantit à ses clients des temps de réaction rapides et une qualité élevée „Made in Germany“ conformément aux normes de qualité nationales et internationales certifiées.

medifa s'oriente résolument vers les exigences de ses clients. En accord avec le slogan „we care“, les clients du monde entier peuvent compter sur un conseil, un traitement et une qualité de premier ordre, fournis par un seul et même fournisseur.

Produits

- Éclairages opératoires (medifa H!Light)
- Tables d'opération mobiles
- Tables d'opération mobiles carbone pour applications mini-invasives
- Accessoires pour tables et éclairages opératoires
- Fauteuils d'examen et Fauteuils de soins (gynécologie, urologie et proctologique)
- Mobilier médical fonctionnel

medifa dans le monde

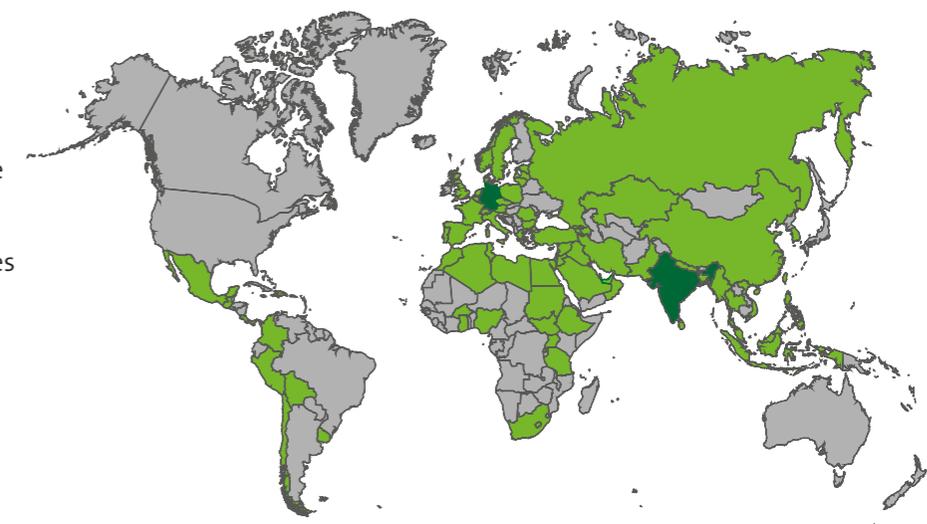



medifa GmbH

Industriestraße 5
57413 Finnentrop
Germany
fon +49 2721 71 77 -0
fax +49 2721 71 77 -255
info@medifa.com

Version 01-23-FR

Sous réserve de modifications dues au développement technique.

www.medifa.com

we care. Code



Made in Germany

we care.